



Invacare®

Esprit Action®⁴ NG

Discret, Léger et Transportable !
De la version junior à la version adulte



Invacare **Esprit Action⁴_{NG}** est un fauteuil roulant électrique très discret à dominante intérieure entièrement démontable sans outils pour faciliter le transport (l'élément le plus lourd ne pèse que 15 Kg). Il est convertible en fauteuil roulant manuel léger avec des roues 24". Sa largeur hors tout réduite le rend plus étroit qu'un fauteuil roulant manuel et permet de se faufiler à travers toutes les portes. Disponible en 12 largeurs d'assise (305 à 605 mm) et en 6 profondeurs d'assise (325 à 500 mm) pour répondre aux besoins des enfants (avec simple croisillon évolutif sur les petites largeurs) et des adultes (double croisillon). Ses moteurs à induction procurent un confort de conduite incomparable.



Compact et léger

Grâce à la nouvelle structure du châssis disponible en 5 coloris, la largeur hors tout est réduite de 40 mm par rapport à l'ancienne génération. On ne rajoute ainsi plus que 170 mm par rapport à la largeur d'assise pour obtenir la largeur totale du fauteuil.

Design épuré

Discret, l'**Esprit Action⁴_{NG}** procure tous les avantages de la conduite d'un fauteuil électrique d'intérieur/extérieur aménagé sans en donner l'apparence.



De nombreuses configurations possibles !

Le réglage en largeur des accoudoirs (+60 mm maximum) permet de s'adapter à une potentielle évolution de la morphologie tout en conservant une largeur hors tout réduite du fauteuil.

Il peut être doté en option d'un dossier confort ou de dossiers de positionnement **Matrx[®]**. Sa double commande intuitive avec capteurs de pression en option, offre une assistance à la poussée et au freinage afin de faciliter la conduite de la tierce-personne.

Compatible en option montée avec le **Scalamobil + Scalaport**, le fauteuil devient un fauteuil électrique monte escalier utilisable par une tierce-personne.

Caractéristiques et options



Double commande intuitive à capteurs de pression (simple ou double) + Roulettes anti-bascule à démontage rapide Alber (option)

Permet à une tierce-personne de conduire le fauteuil sans efforts et de façon intuitive.



Roulettes anti-bascule Alber (option)

A démontage rapide réglable en longueur et en inclinaison, la fonction béquille facilite le montage et le démontage des roues.

NOUVEAU



Dossier rabattable

Permet de réduire l'encombrement du fauteuil et faciliter son transport.



Protection de roues

Anti-choc équipé de série.



Accoudoirs réglables en largeur

Permet d'augmenter la largeur d'assise du fauteuil jusqu' à + 50 mm.



Démontage des roues motorisées



Largeur hors tout réduite

La motorisation est intégrée au châssis pour rendre le fauteuil encore plus compact.



Kit roues manuelles (option)

Le fauteuil devient un fauteuil roulant manuel.



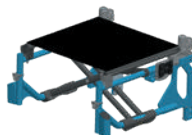
Fauteuil démonté et plié

La partie la plus lourde ne pèse que 15 kg (châssis).



Simple croisillon évolutif

Un simple croisillon pour les largeurs entre 305 et 380 mm avec des profondeurs d'assise réglables de 325 à 375 mm.



Double croisillon

Un double croisillon pour les largeurs entre 380 et 605 mm avec des profondeurs d'assise comprises entre 400 et 500 mm.



Scalamobil + Scalaport (Option)

A l'aide d'une tierce-personne, le fauteuil électrique devient monte-escalier pour faciliter l'accès à l'étage et rendre tout escalier accessible sans quitter son fauteuil.




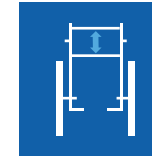


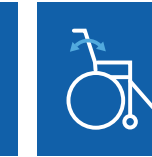


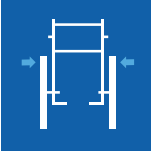





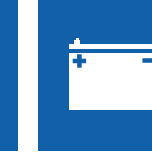
Mise au coffre






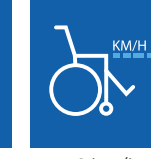

Compact et facile à démonter pour faciliter le transport dans n'importe quel véhicule même de petite taille.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

 Largeur d'assise 305-380 mm	 Profondeur d'assise 325-375 mm	 Hauteur sol/ siège 460 or 485 mm	 Hauteur de dossier 430 - 510 mm	 Longueur UL 210 - 480 mm	 Inclinaison de l'assise 3°	 Inclinaison du dossier 0° - 30°
---	--	--	---	---	--	---

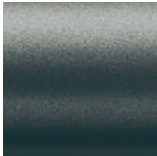







 Largeur hors-tout Largeur d'assise + 170 mm	 Hauteur 1002 mm	 Longueur hors-tout 900 - 1100 mm	 Longueur sans repose-jambes 640 - 840 mm	 Poids du fauteuil 45 kg ¹	 Poids max. utilisateur 80 kg (simple croisillon) 125 kg (double croisillon)	 Batteries 12 Ah (17 Ah)
---	---	--	--	---	--	---

 Diamètre de giration 1860 mm	 Franchissement 30 mm	 Pente max. sécurité 5° / 10%	 Puissance des moteurs 150 W	 Autonomie 14 km (12 Ah) 30 km (17 Ah)	 Vitesse 6 km/h	 Réglage des accoudoirs + 50 mm
---	---	---	--	--	---	---



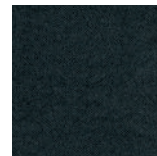
1. Élément le plus lourd du fauteuil: 15 kg

Coloris de châssis

Gris Ardoise (uniquement sur double croisillon)	Blanc Perle	Bleu Pop	Violet Hypnotique
			
Rouge Mat	Noir Mat	Bleu Polaire (uniquement sur simple croisillon)	Rose Bonbon (uniquement sur simple croisillon)
			

Revêtement

Nylon Noir
(toile d'assise et de dossier)



Fabrication spéciale en option: différentes fabrications sur le fauteuil sont possibles (taille, accessoires, coloris avec RAL). Veuillez contacter votre Service Clients pour toutes demandes de devis et de délais. Pour plus d'informations, de détails techniques, références et autres options, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du fauteuil.

Pour plus d'informations, de détails techniques, références et autres options, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du fauteuil.