




Canules nasales double lumière


A utiliser avec des systèmes portables d'oxygène liquide qui conservent l'oxygène en fournissant du gaz uniquement lorsque le patient le demande

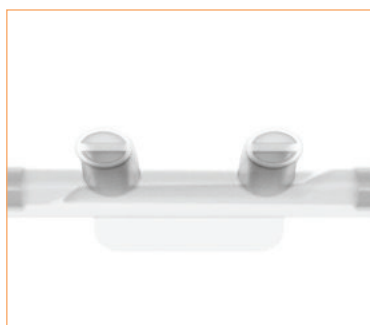

Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Canules Nasales

Canules nasales double lumière

Les canules nasales double lumière sont spécifiquement conçues pour une utilisation avec les systèmes portables d'oxygène liquide, qu'ils soient activés par électronique ou par pression. Elles sont équipées d'une tubulure multicanaux pour apporter l'oxygène et détecter la pression simultanément pour chaque narine. L'apport d'oxygène s'arrête à la fin de l'inspiration, afin d'optimiser la réserve en gaz. Les canules sont fabriquées à partir du matériau souple avec finition satinée d'Intersurgical, dont les tests ont prouvé une réduction de 20% de la friction⁽¹⁾ sur le visage et les oreilles du patient en comparaison des canules standards.

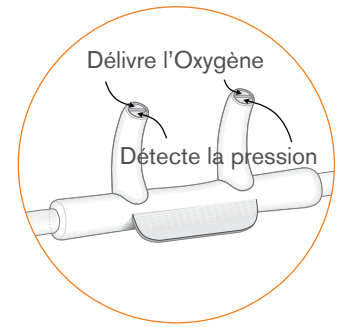

Tubulure multicanaux résistante à l'écrasement

Permet un débit continu d'oxygène même en cas de plicature

Finition satinée

20% de friction en moins¹

Tuyaux solidaires

Gestion efficace de l'encombrement

Embouts souples

Minimisent l'irritation



Canaux d'apport et de détection sur chaque embout

Réponse optimale à la demande et évite le déséquilibre entre les narines



Embouts courbes :

Forme anatomique pour un ajustement amélioré

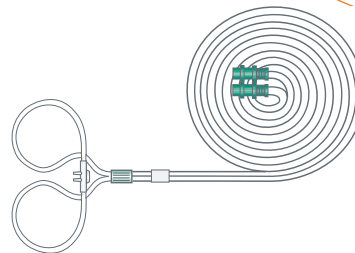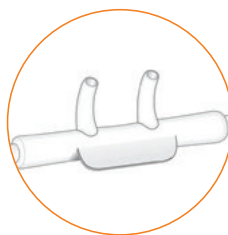

| Référence | Description | Long. | Qté/bte |
|-----------|---|-------|---------|
| 1165011 | Canule nasale double lumière adulte avec embouts courbes et tuyau | 1.25m | 50 |
| 1165012 | Canule nasale double lumière adulte avec embouts courbes et tuyau | 1.8m | 50 |
| 1165013 | Canule nasale double lumière adulte avec embouts courbes et tuyau | 2.5m | 50 |

HELIOS est une marque déposée de CAIRE® Inc.

Références: 1. Annan. J. 69381 15.04.13.

IS10.30 FR • Issue 5 12.22



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016,
ISO 14001:2015 et MDSAP

