




Canules de Guedel monobloc

Design sécurisant

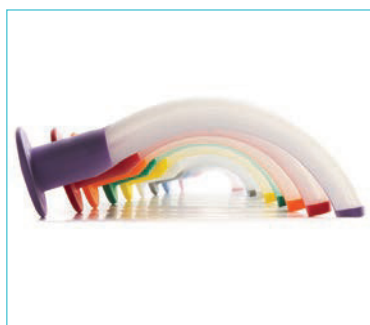

Gestion des Voies Aériennes ▪ Dispositifs pour voies aériennes

Canules de Guedel monobloc


Design sécurisant

Les dernières avancées technologiques en matière de fabrication nous ont permis de concevoir une nouvelle gamme de canules de Guedel présentant une réelle innovation technique au regard des trente dernières années.

Grace à la combinaison de deux matériaux aux caractéristiques physiques différentes, injectés dans un même moule, le design monobloc ne nécessite pas de renfort anti-morsure interne séparé, présent sur les canules conventionnelles.

Un renfort anti-morsure détaché ou mal fixé constitue un réel danger pour la sécurité du patient et a fait l'objet de plusieurs signalements d'incidents. Le nouveau concept Monobloc supprime tous les risques qui en découlent.

Outre une meilleure sécurité, le design Monobloc comporte également une extrémité distale lisse prévenant le risque de blessure du patient. En complément, une gamme stérile est également disponible.

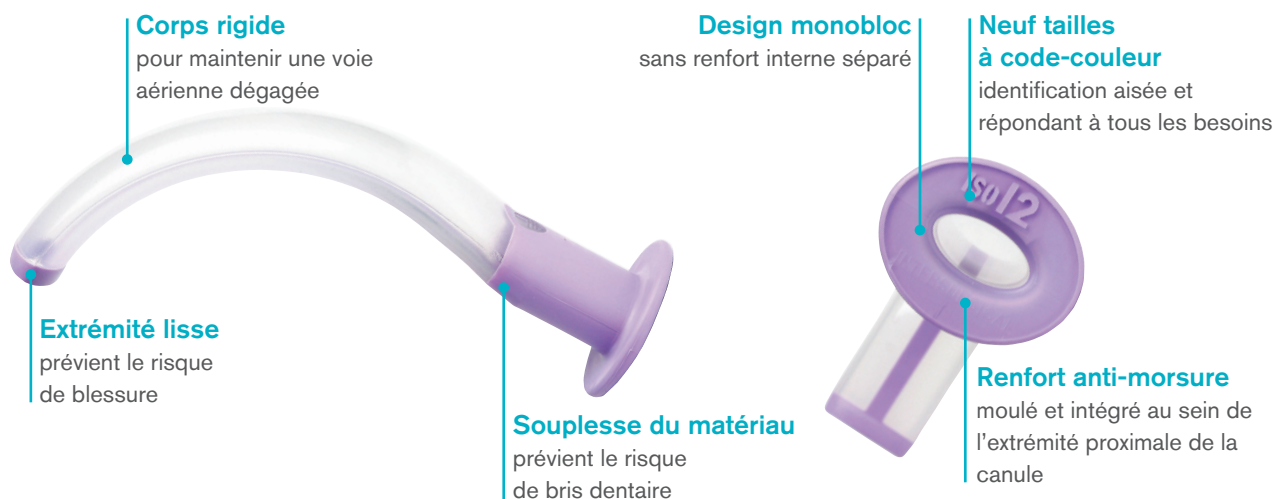

Référence	Description	Taille	ISO	Qté/bte
1115120 (S*)	Canule de Guedel monobloc, violet	5	12.0	70
1114100 (S*)	Canule de Guedel monobloc, rouge	4	10.0	80
1113090 (S*)	Canule de Guedel monobloc, orange	3	9.0	80
1112080 (S*)	Canule de Guedel monobloc, vert	2	8.0	100
1111570 (S*)	Canule de Guedel monobloc, jaune	1.5	7.0	100
1111065 (S*)	Canule de Guedel monobloc, blanc	1	6.5	20
1110055 (S*)	Canule de Guedel monobloc, gris	0	5.5	25
1100050 (S*)	Canule de Guedel monobloc, bleu	00	5.0	25
1000035 (S*)	Canule de Guedel monobloc, rose	000	3.5	25

produit à faible impact environnemental

disponible en version stérile

(S*) ajouter un S à la fin du code à 7 chiffres pour commander la version stérile du produit

IS6.10 • Issue 1 08.14



33, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Le Pérípole, 94127 Fontenay Sous Bois Cedex
T: +33 (0)1 48 76 72 30 F: +33 (0)1 48 76 91 38 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr

UK ▪ Ireland ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal ▪ Italy
Netherlands ▪ Sweden ▪ Lithuania ▪ Russia ▪ Czech Republic
South Africa ▪ China ▪ Japan ▪ Taiwan ▪ Philippines
USA ▪ Colombia ▪ Australia



Pensez-y avant d'imprimer
Economisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso