

 **SUNRISE**
MEDICAL.


QUICKIE[®]
Live without limits.

SALSA M² MINI

LA BASE MOTRICE **SIX ROUES** LA PLUS
ETROITE ET PERFORMANTE AU MONDE!





SALSA M² Mini

Plus jamais de concession entre manoeuvrabilité intérieure et performance de conduite à l'extérieur grâce au nouveau **Quickie Salsa M² Mini** !

Découvrez le fauteuil roulant électrique roues motrices centrales, le plus étroit et performant au monde avec un châssis de seulement 52 cm de large – soit 9 cm plus étroit que le leader du marché le Quickie Salsa M².

Contrairement à d'autres fauteuils électriques d'intérieur, vous n'avez pas à vous préoccuper de ses performances extérieures, le **Salsa M² Mini** bénéficie de la même base motrice que le Salsa M² – elle est seulement plus étroite – ainsi toutes les grandes fonctionnalités que vous obtenez avec un fauteuil d'extérieur sont réunies dans la base motrice du fauteuil roulant électrique le plus étroit au monde ...

... PLUS JAMAIS DE COMPROMIS

SALSA M² Mini

LARGEUR HORS TOUT

54cm



BASE MOTRICE

52cm

AGILITÉ INTÉRIEURE REMARQUABLE ...

// DANS LES PETITS LOGEMENTS –

Avec des couloirs et espaces de vie étroits.

// DANS LES ASCENSEURS –

court, étroit et plus léger que n'importe quel fauteuil électrique six roues – à partir de 100 kg, idéal pour les ascenseurs exigus là où les autres fauteuils sont trop imposants ou lourds.

// FAUTEUIL ADAPTE AUX VEHICULES –

étroit, hauteur d'assise ultra basse, technologie anti pitch, ces caractéristiques ne simplifient pas seulement l'entrée et la sortie d'un véhicule aménagé. Elles vous apportent également confort et stabilité au volant de votre véhicule.

... PERFORMANCE EXTÉRIEURE RECONNUE

// **PROFITEZ D'UNE CONDUITE FLUIDE ET STABLE, MÊME SUR UN TERRAIN ACCIDENTÉ**, grâce au système SpiderTrack breveté Quickie – six roues suspendues indépendantes absorbant tous les défauts du terrain.

// **TECHNOLOGIE ANTI-PITCH QUICKIE** élimine le tangage sur les pentes, tout votre poids est placé directement sur les roues motrices optimisant ainsi la traction, vous n'avez jamais été dans une position de conduite aussi rassurante.

// **PERFORMANCE ET AUTONOMIE!** Profitez d'une motorisation efficace de 6 km/h ou 10 km/h alimentée par des batteries de 36 Ah.

// **QUELLES QUE SOIENT VOS EXIGENCES DE PERFORMANCE OU DE FONCTIONNALITÉ**, la gamme d'options du Salsa M² Mini vous offre un équilibre parfait entre une conduite exaltante et une grande fonctionnalité.



SALSA M² MINI présenté ici dans sa version enfant

LE POSITIONNEMENT...

Le Salsa M² Mini opte pour votre bien être postural en choisissant le "must" du positionnement: JAY. Equipez votre Salsa M² Mini du dossier souple Jay Shape et votre morphologie dorsale sera respectée!

// LARGES SANGLES REGLABLES EN TENSION –
présentent sur toute la hauteur du dossier se réglant individuellement à droite et à gauche. Confort, répartition des pressions, stabilité et accompagnement des déformations assurés.

// MOUSSE SOUPLE ET HOUSSE AÉRÉE –
sa mousse interne épouse parfaitement votre morphologie et évite de ressentir une gêne lors de la tension des sangles. Sa housse 3DX augmente la ventilation du dossier, limitant transpiration et humidité.

// BOUCLES AUTOBLOQUANTES –
maintiennent la tension des sangles, sans risque de se dérégler involontairement.

// CALES TRONC –
les cales tronc ou supports latéraux favorisent le redressement et l'équilibre du tronc. Multi-réglables: en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur pour affiner votre positionnement.



 **JAY**[®]



... LES FONCTIONS

Le Salsa M² Mini est si stable qu'il peut être équipé de toutes les fonctions électriques pour répondre à vos besoins cliniques.

// BASCULE D'ASSISE ÉLECTRIQUE –

si vous avez besoin de soulager vos points de pression tout au long de la journée, quoi de plus simple et confortable que la fonction bascule d'assise électrique. Option très pratique lorsqu'un lève-personne est nécessaire: permet de guider le bassin à l'arrière du siège avec plus de facilité.

// LIFT ÉLECTRIQUE –

idéal pour vous retrouver à hauteur de ceux qui vous entourent et être totalement autonome pour atteindre quelque chose en hauteur.

// INCLINAISON DE DOSSIER ÉLECTRIQUE –

fonction très souvent utilisée pour se relaxer en cours de journée. Si vous passez beaucoup de temps dans votre fauteuil, une petite inclinaison de temps en temps vous permettra de changer de position et de soulager ainsi des points de pression.



Personnalisez votre Salsa M² Mini avec notre service Built-4-Me.




LE STYLE...

Lors de la conception du **Salsa M² Mini**, le style n'a pas été relayé au second plan. Il respecte la définition du beau design selon Quickie: lignes épurées combinées à une allure affirmée et des performances sportives.

Choisissez la couleur du carénage parmi quatre choix ou optez pour un coloris plus personnel grâce à notre service Built-4-Me. Les bras des roues avant au design moderne et à la finition noire mate s'associent parfaitement à n'importe quelle couleur de carénage.


Bleu

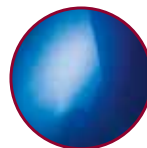

Noir mat



Rouge

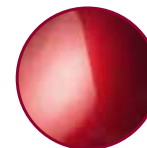

Blanc



OPTIONS ET CARACTÉRISTIQUES DU SALSA M² MINI

Configurez le Salsa M² Mini selon vos besoins personnels – parmi un large choix d'options.




// BASCULE D'ASSISE ÉLECTRIQUE A COMPENSATION

Inclinaison de 0° à 30° ou -5° à 25° à compensation pour conserver le point d'équilibre.



// ENTRETIEN

Accès aux batteries sans outils. Capot supérieur fixé par velcro.

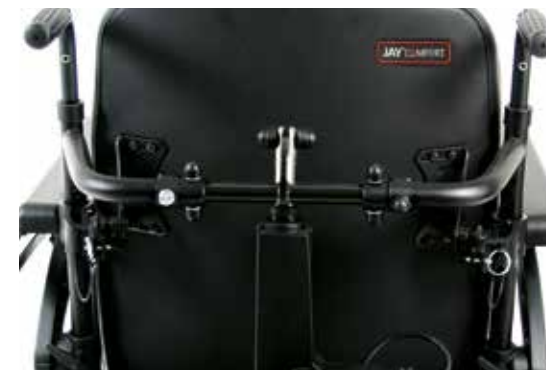

// DOSSIER ÉLECTRIQUE

Plage d'inclinaison de -5° à 30°.



// CALES TRONC

Multi-réglables pour un positionnement optimal du tronc.



// LARGE GAMME DE COMMANDES

- R-Net Led
- R-Net écran couleur
- Commande double
- Large choix de commandes spéciales Switch-it.



// COUSSINS ET DOSSIERS JAY COMFORT

Pour un soutien postural optimum.

DONNEES TECHNIQUES

Salsa M² MINI // ROUES MOTRICES CENTRALES

Poids max. Utilisateur:	140 kg	Largeur mini. pour 1/2 tour:	110 cm
Largeur d'assise:	réglable de 41 à 51 cm	Pente max. sécurité:	8°
Profondeur d'assise:	réglable de 41 à 51 cm	Franchissement max:	7 cm
Hauteur d'assise:	43 – 49 cm	Diamètre des roues:	roues motrices: 12,5"; avant et arrière: 7"
Bascule d'assise:	à compensation de 0° à 30° ou -5° à 25°	Coloris carénage	rouge, bleu, blanc, noir mat
Hauteur de dossier:	46 – 51 cm	Autonomie max (selon ISO 7176-4)	23 km (varie selon le profil de la distance parcourue, le poids utilisateur et les options électriques embarquées)
Inclinaison de dossier:	manuelle: -4° à 16° - à vérins: -5° à 30° - électrique: -5° à 30°	Poids fauteuil:	à partir de 97 kg (incluant batteries, selon options)
Largeur hors-tout:	Base motrice 52 cm / Assise: 54 à 64 cm (extérieur manchettes)	Crash testé:	Oui - avec système de retenue 4 points & station d'arrimage Dahl (approuvé pour transport dans un véhicule selon ISO 7176-19)
Longueur totale:	112 cm (avec repose-pieds latéraux)	Transport à vide:	Bien fixer le fauteuil dans le véhicule (ex. voiture ou avion)
Hauteur totale:	110 cm	Usage prévu et environnement:	Personnes à mobilité réduite, usage mixte: intérieur et extérieur. Catégorie: classe B.
Vitesses:	6 km/h - 10 km/h		
Batteries:	2 x 36 Ah		
Electronique:	R-Net		

Pour plus d'informations sur les options et accessoires disponibles, veuillez vous référer aux fiches de mesure disponibles sur notre site internet.

Tolérance usine +/- 1 cm

Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 31
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

